

# À PROPOS DU BAIN IONIQUE DÉTOXIFIANT

---

## Contre-indications :

- ✓ Enfants de moins de 6 ans ;
- ✓ Femmes enceintes ou allaitantes ;
- ✓ Stimulateur cardiaque ou défibrillateur ;
- ✓ Chimiothérapie ou radiothérapie en cours ;
- ✓ Dialyse/Insuffisance rénale grave ;
- ✓ Épilepsie chronique sous traitement ;
- ✓ Greffes d'organes avec traitement antirejet ;
- ✓ État de santé fragile ou fortement médicamenté.



## Notes importantes :

- ✓ Bien s'hydrater avant, pendant et après chaque séance (2 litres d'eau saine/jour) ;
- ✓ Éviter les aliments lourds et très caloriques pendant tout le protocole ;
- ✓ Suspendre la séance en cas de malaise intense et persistant ;
- ✓ Éviter d'immerger des plaies ouvertes et sanglantes dans l'eau du bain ;
- ✓ Éviter les séances tardives si cela vous procure un fort regain de vitalité ;
- ✓ Nettoyer l'unité principale avec un linge humide sans aucun produit chimique ;
- ✓ Ne jamais submerger l'appareil principal et le manipuler avec délicatesse ;
- ✓ **Le mode « Acide » est conseillé** pendant les deux premiers mois d'usage de l'appareil.
- ✓ **Pour certains cas particuliers** comme pour les jeunes enfants de 6 à 12 ans, les personnes âgées, les cas de santé fragile et de médication multiple, éviter les inconforts en débutant progressivement avec quelques séances de 15 minutes à faible intensité avec l'ionisateur cylindrique avant d'augmenter la durée, la puissance et la répétition des séances ;
- ✓ **Une inoffensive résonance électrique se produit dans l'eau au démarrage** et aussi à quelques reprises durant la séance, ce qui est normal avec le puissant ionisateur triangulaire, mais cette sensation est très variable d'un usager à l'autre ;
- ✓ Utiliser la cartouche ionisante ronde afin d'atténuer cet effet indésirable ;
- ✓ **Ne jamais utiliser le Zapper lorsque les pieds sont dans l'eau** avec l'ionisateur et le bracelet sur soi. Toujours retirer les accessoires du bain ionique avant d'utiliser le Zapper ;
- ✓ **La ceinture chauffante est facultative** et s'utilise à volonté indépendamment ou simultanément avec les autres fonctions de l'ensemble du VitalBody 3 en 1 ;
- ✓ **Le bain ionique et le Zapper ne fonctionnent pas simultanément.**

# COMMENT UTILISER LE BAIN IONIQUE ?

## A. PRÉPARATION DU BASSIN D'EAU




- ✓ Placer la cuvette rétractable bleu-gris dans un sac-poubelle biodégradable en suivant la procédure détaillée incluse avec le bassin ;
- ✓ Remplir le bassin d'eau chaude et tolérable afin d'immerger entièrement l'ionisateur choisi. La chaleur dilate les pores de la peau afin de faciliter la pénétration des ions négatifs et l'évacuation des toxines ;
- ✓ Avoir à proximité une serviette sèche ou un rouleau d'essuie-tout, un pulvérisateur rempli d'eau et un distributeur de sel de mer avant le démarrage de la séance.

## B. PRÉPARATION DES ACCESSOIRES



- ✓ Utiliser le côté gauche ou le côté droit de l'unité principale pour exécuter la séance ;
- ✓ Le côté gauche est activé par défaut pour les appareils activés en simple ;
- ✓ Brancher et immerger complètement l'ionisateur cylindrique de base ou le triangulaire positionné entre les pieds ou les mains dans l'eau du bassin ;
- ✓ Immerger une section de la bande élastique du bracelet de conduction dans l'eau du bassin avant de le positionner au poignet (bain de pieds) ou à la cheville (bain de mains) ;
- ✓ Brancher le bracelet antistatique précédemment mouillé à côté de l'ionisateur en poussant fermement son embout auto-ajustable dans son connecteur.

## C. ÉVALUATION DU PH SALIVAIRE

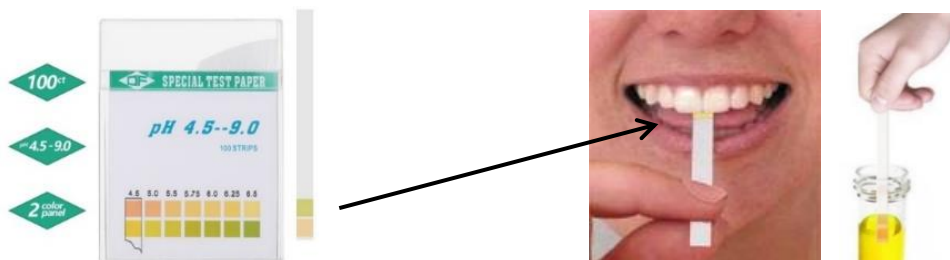

- ✓ L'évaluation du pH salivaire est très approximative et parfois trompeuse, mais adéquate pour évaluer la tendance du pH corporel dans son ensemble ;
- ✓ Pour obtenir une lecture plus pertinente, prendre le pH de la deuxième urine du matin ;
- ✓ Se fier préférentiellement aux symptômes chroniques souvent indicateurs d'une acidose toxique bloquée dans les tissus profonds (douleur, inflammation, fatigue, etc.) ;
- ✓ Prendre une petite languette dans la boîte illustrée précédemment ;
- ✓ Rincer la bouche avec de l'eau et renouveler la salive avant de mesurer le pH buccal ;
- ✓ Tremper les deux carrés situés au bout du papier indicateur dans la salive ou l'urine ;
- ✓ Attendre 15 secondes afin que la réaction soit terminée sur les deux tampons ;
- ✓ Comparer la couleur des indicateurs avec la charte affichée sur le boîtier :
  - PH entre 7,0 et 7,5 = Neutre (zone idéale) ;
  - PH inférieur à 7,0 = Acide ;
  - PH supérieur à 7,5 = Alcalin ou basique.

#### D. OPÉRATION DU BAIN IONIQUE



- ✓ Préalablement lire les contre-indications et les notes importantes précédentes afin de bien les respecter ;
- ✓ Brancher l'appareil à l'aide du bloc de conversion électrique avant d'appuyer longuement sur la touche blanche « ON/OFF » afin de le mettre en marche ;
- ✓ Appuyer sur la touche rouge-jaune « ZAP/PH » afin de sélectionner le programme désiré « ACIDE », « NEUTRE » ou « BASIQUE » selon le pH corporel mesuré précédemment ;
- ✓ Le mode « ACIDE » présélectionné est idéal pour les deux premiers mois du protocole ;
- ✓ Chaque programme de l'appareil agit différemment sur l'équilibre acido-basique :
  - **MODE ACIDE** : 80 % (-) et 20 % (+). Alcalinise le corps et élimine surtout les radicaux libres. Un mode fréquemment utilisé pour un pH inférieur à 7,0,
  - **MODE NEUTRE** : 50 % (+) et 50 % (-). Élimine les métaux lourds et les radicaux libres. Un mode utilisé pour un pH entre 7,0 et 7,5,
  - **MODE BASIQUE** : 20 % (-) et 80 % (+). Aide principalement la chélation des métaux lourds. Un mode utilisé pour un pH supérieur à 7,5.

- ✓ Appuyer la touche gradateur jaune « PUISSANCE » afin de sélectionner l'intensité désirée « FAIBLE », « MOYEN » ou « FORT » :
  - Faible = Courant électrique de 1,5 ampère,
  - Moyen = Courant électrique de 2,0 ampères,
  - Fort = Courant électrique de 2,5 ampères.
- ✓ La puissance « FAIBLE » présélectionnée est idéale pour les quelques premières séances d'un débutant afin d'amoindrir les potentiels effets initiaux de détoxication ;
- ✓ Appuyer sur la touche horloge jaune « MINUTEUR » afin d'ajuster le temps de la séance ionique entre 10 et 60 minutes ;
- ✓ La durée préprogrammée de 30 minutes est adéquate dans la majorité des cas ;
- ✓ Ajouter, brasser et bien dissoudre  $\pm 5$  tours de moulin à sel rose, soit environ 1/4 de cuillère à café dans l'eau afin d'en augmenter la conduction électrique ;
- ✓ **ATTENTION à ne pas trop en mettre**, car cela pourrait endommager l'appareil ;
- ✓ Appuyer sur la touche verte GO « ION » afin de démarrer ou arrêter la séance ionique ;
- ✓ Ajouter un peu plus de sel dans l'eau si le voyant rouge « AJOUTER DU SEL » s'allume ;
- ✓ Trop de sel a été additionné à l'eau si l'afficheur de temps indique « HI » en vert ;
- ✓ Vérifier le bracelet antistatique si le voyant rouge « VÉRIFIER LE BRACELET » s'allume ;
- ✓ Si tout est en règle, un voyant vert « SÉANCE EN COURS » s'allume ;
- ✓ Un point vert clignotant apparaît aussi dans le bas de l'afficheur de temps ;
- ✓ Il est important d'être calme, détendu et inactif durant la séance ionique ;
- ✓ En cas de problème, suivre la procédure de dépannage suivante.

## E. DÉPANNAGE DU BAIN IONIQUE

### Si le voyant rouge « VÉRIFIER LE BRACELET » s'allume :

- ✓ Mettre les pieds ou une main dans l'eau avant le démarrage ;
- ✓ Immerger une partie de la bande élastique noire du bracelet dans l'eau du bassin avant de le fixer au poignet pour un bain de pieds ou à la cheville pour un bain de mains ;
- ✓ Installer le bracelet de conduction avant le démarrage de la séance ;
- ✓ Remplacer le bracelet par un neuf si l'alarme persiste (défectuosité possible).

### Si le voyant rouge « AJOUTER DU SEL » s'allume :

- ✓ Mettre les pieds ou une main dans l'eau avant le démarrage ;
- ✓ Bien répartir et dissoudre le sel dans l'eau du bassin par un léger brassage ;
- ✓ Vérifier que l'ionisateur est entièrement recouvert d'eau ;
- ✓ Remplacer l'ionisateur par un neuf si l'alarme persiste (défectuosité possible).

### Si l'appareil inscrit « HI » en vert sur l'afficheur de temps :

- ✓ Il est probable que trop de sel ait été ajouté dans l'eau (1/4 de cuillère à café) ;
- ✓ Ajouter de l'eau dans le bassin afin de réduire la concentration du sel dissout ;
- ✓ Augmenter la puissance de la séance afin d'augmenter la tolérance de l'appareil ;
- ✓ Changer l'eau du bassin contenant un excès de sel ;
- ✓ Remplacer l'ionisateur si l'alarme persiste (défectuosité possible).

### Si le temps s'écoule, mais qu'aucune réaction ne se produit dans l'eau du bassin :

- ✓ Appuyer sur la touche verte **GO** « ION » et non pas sur la touche rouge dédiée au Zapper ;
- ✓ Le voyant « **SESSION EN COURS** » doit être vert, car le blanc est dédié au Zapper.

Si l'appareil principal semble être sans aucune alimentation électrique :

- ✓ Resserrer les branchements du bloc de conversion électrique ;
- ✓ Vérifier que son **voyant vert** de fonctionnement sur le coin supérieur droit est allumé ;
- ✓ Vérifier l'état du fusible arrière en dévissant son capuchon et s'assurer que le filament métallique interne ne soit pas rompu et que le tube en verre ne soit pas noirci ;
- ✓ Un fusible de rechange se trouve dans la pochette interne de la valise de transport ;
- ✓ Revisser le capuchon du compartiment à fusible en arrière de l'appareil.

Si un problème persiste, veuillez nous contacter au 1-866-981-0357.

## F. FIN DE LA SÉANCE



- ✓ **Retirer la ceinture et le bracelet antistatique** en les laissant branchés à l'appareil ;
- ✓ Rincer, laver et essuyer les pieds ou les mains afin d'enlever les résidus ;
- ✓ **Débrancher l'ionisateur et l'apporter avec l'eau du bassin** lors de la vidange ;
- ✓ Vider le bassin d'eau dans les toilettes et jeter le sac biodégradable dans la poubelle ;
- ✓ Nettoyer le bassin avec une éponge magique ou un produit doux si nécessaire ;
- ✓ Éviter d'utiliser un produit récurant ou des produits chimiques toxiques ;
- ✓ **Éteindre l'appareil et débrancher le bloc d'alimentation électrique** de la prise murale afin d'éviter qu'il soit inutilement sous tension pendant plusieurs jours ;
- ✓ **Boire un grand verre d'eau en y ajoutant 20 gouttes de minéraux liquides ConcenTrace** et ajouter un peu de jus de citron ou d'orange afin de cacher le goût si nécessaire.

## G. ENTRETIEN DES IONISATEURS

**PEROXYDE 3 %**  
Stérilisateur  
Vendu en pharmacie



**ACIDE CITRIQUE EN POUDRE**  
Nettoyeur et dérouillant  
Vendu partout en ligne

- ✓ Brosser et rincer les résidus importants de la cartouche ionisante sous l'eau du robinet ;
- ✓ Dissoudre 4 cuillères à soupe d'acide citrique (60 ml = 60 g) dans 1 litre d'eau chaude ;



- ✓ Immerger la cartouche ionisante prélavée dans la solution pendant 30 à 60 minutes dans un récipient refermable en verre (pot de Masson) ou en plastique (pot de yaourt) ;
- ✓ Dissoudre les dépôts et la rouille dans cette solution après 5 séances ioniques ;
- ✓ Éviter les trempages trop longs ou trop fréquents pour réduire l'usure chimique prématurée des pièces métalliques et des soudures internes ;
- ✓ Conservez la solution pour 3 ou 4 trempages supplémentaires avant de la renouveler ;
- ✓ Fermer le pot avec son couvercle ;
- ✓ Brosset et rincer abondamment la cartouche d'ionisation avec de l'eau pour éliminer les résidus et le produit restant ;
- ✓ Essuyez l'excès d'eau de la cartouche à l'aide d'un chiffon ;
- ✓ Stériliser l'ionisateur si nécessaire avec du peroxyde 3 % vendu en pharmacie, surtout lors d'un usage commercial répétitif avec de nombreux différents utilisateurs ;
- ✓ Tremper l'ionisateur dans le peroxyde quelques minutes avant de le laisser sécher.

## H. PROTOCOLE D'USAGE DU BAIN IONIQUE



- ✓ **Répéter les séances 2 fois par semaine avec un intervalle de 3 jours durant 3 mois ;**
- ✓ Faire des séances par les pieds majoritairement et par les mains de temps en temps afin de stimuler aussi la partie supérieure du corps ;
- ✓ **Exécuter des séances de 15 minutes seulement** durant le 1<sup>er</sup> mois pour une condition de santé fragile ou un cas particulier risquant des malaises de détoxification initiaux ;
- ✓ **L'effet électrique dans l'eau du bassin** est très bénéfique pour les points d'acupuncture immergés, agissant ainsi sur la circulation de l'énergie vitale dans les méridiens ;
- ✓ Surélever le bassin d'eau entre les jambes lors d'un bain de mains afin que la position soit confortable pour le dos, minimisant ainsi les tensions dans les épaules et le cou ;
- ✓ **Bien suivre le protocole afin d'éviter une surcharge toxique** remise en circulation dans le système lymphatique, agissant comme un collecteur de déchets cellulaires ;
- ✓ **En cas de malaise persistant ou de crise de rétablissement** durant plus de 3 jours, cesser les séances pour un certain temps afin de reposer le métabolisme ;
- ✓ **Boire beaucoup d'eau pure, manger sainement et faire plus d'exercice** afin de favoriser la détoxification des tissus et des fluides corporels ;
- ✓ **Reprendre le protocole où celui-ci a été interrompu** dès que les complications temporaires et les symptômes de nettoyage métabolique ont disparu ;
- ✓ **Le Zapper antiparasitaire** s'intègre au protocole à partir du 2<sup>e</sup> mois seulement ;

- ✓ Une séance ionique de 30 minutes est identifiée par **ION-30** dans la grille suivante ;
- ✓ **Voici le résumé des trois premiers mois d'usage du bain ionique excluant le Zapper :**

LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI	DIMANCHE
À répéter sur 3 MOIS	1 ION-30	2	3	4 ION-30	5	6
7 ION-30	8	9	10 ION-30	11	12	13 ION-30
14	15	16 ION-30	17	18	19 ION-30	20
21	22 ION-30	23	24	25 ION-30	26	27
28 ION-30	29	30	31 ION-30			

- ✓ **Après l'exécution de ce protocole initial de 3 mois**, poursuivre avec une régularité de quelques séances d'ionisation par mois ou idéalement chaque semaine ;
- ✓ **Une maintenance préventive plus intense** est possible en faisant continuellement et sans relâche 2 séances de 30 à 60 minutes par semaine, soit tous les 3 jours ;
- ✓ Boire beaucoup d'eau, manger peu et très sainement tout en évitant les sucres, les glucides et les produits laitiers afin de minimiser l'inflammation, l'acidité métabolique et la prolifération des microorganismes parasites nuisibles dans le corps ;
- ✓ Il est possible de combiner les séances avec des produits naturels épuratifs ou des suppléments essentiels purs et de bonne qualité ;
- ✓ En cas de persistance de certains symptômes ou pour un suivi particulier, nous contacter à [info@VitalAxion.com](mailto:info@VitalAxion.com) ou au 1-866-981-0357 afin d'être guidé vers d'autres solutions alternatives ou conseillé sur des méthodes naturelles complémentaires.

# À PROPOS DU ZAPPER ANTIPARASITAIRE

---

## Contre-indications :

- ✓ Femmes enceintes ou allaitantes ;
- ✓ Stimulateur cardiaque ou défibrillateur ;
- ✓ Chimiothérapie ou radiothérapie en cours ;
- ✓ Dialyse/Insuffisance rénale grave ;
- ✓ Épilepsie chronique sous traitement ;
- ✓ **Troubles cardiaques importants ;**
- ✓ **Prothèses métalliques.**

## Notes importantes :

- ✓ Bien s'hydrater avant, pendant et après chaque séance (2 litres d'eau saine/jour) ;
- ✓ Éviter les aliments lourds et très caloriques pendant tout le protocole ;
- ✓ Suspendre la séance en cas de malaise intense et persistant ;
- ✓ Éviter de toucher les tiges cuivrées avec des plaies ouvertes et sanglantes ;
- ✓ Éviter les séances tardives si cela vous procure un fort regain de vitalité ;
- ✓ Nettoyer l'unité principale avec un linge humide sans aucun produit chimique ;
- ✓ Ne jamais submerger l'appareil principal dans l'eau et le manipuler avec délicatesse ;
- ✓ **Pour certains cas particuliers** comme les jeunes enfants de moins de 6 ans, les personnes âgées, les cas de santé fragile et de médication multiple, éviter les inconforts en débutant plus doucement avec quelques séances de 5 minutes seulement ;
- ✓ **Varier la fréquence d'une séance à l'autre** afin d'éviter l'accoutumance et obtenir un plus large spectre d'efficacité sur les innombrables et différents parasites ;
- ✓ **Ne jamais utiliser le Zapper lorsque les pieds sont dans l'eau** avec l'ionisateur et le bracelet sur soi. Toujours retirer les accessoires du bain ionique avant d'utiliser le Zapper ;
- ✓ **La ceinture chauffante est facultative** et s'utilise à volonté indépendamment ou simultanément avec les autres fonctions de l'ensemble du VitalBody 3 en 1 ;
- ✓ **Le bain ionique et le Zapper ne fonctionnent pas simultanément ;**
- ✓ Le Zapper peut se révéler très utile pour les animaux de compagnie.




# COMMENT UTILISER LE ZAPPER ?

## A. PRÉPARATION DES TIGES CUIVRÉES



- ✓ Tirer fortement les 2 extrémités du fil principal en déchirant lentement sa gaine autant que nécessaire pour distancier le connecteur rouge et le connecteur noir ;
- ✓ Séparer les fils en direction opposée et les tenir fermement sous les 2 connecteurs ;
- ✓ Connecter les 2 embouts jumeaux du fil aux extrémités de chaque tube sans tenir compte de la couleur rouge ou noire de ceux-ci ;
- ✓ Brancher l'embout unique du fil des tiges cuivrées devant l'unité principale ;
- ✓ **Mouiller la peau et les tiges cuivrées** pour obtenir une meilleure conduction électrique ;
- ✓ Installer les tiges en sachant que les fréquences passent d'une tige à l'autre par le chemin le plus court, ainsi une tige émet le signal et l'autre le reçoit ;
- ✓ **Positionner les tiges l'une à l'opposé de l'autre** dans les mains, sous les pieds, sur les hanches, sous les aisselles, etc.

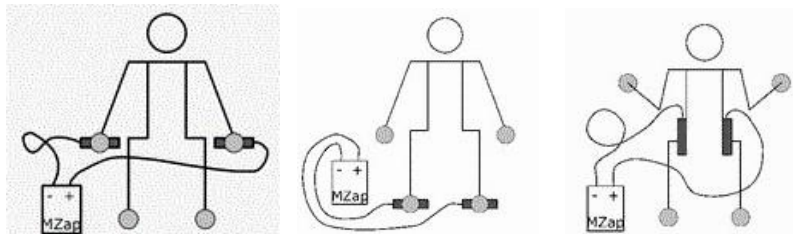

## B. OPÉRATION DU ZAPPER VITALBODY 3 EN 1



- ✓ Préalablement lire les contre-indications et les notes importantes précédentes afin de bien les respecter ;

- ✓ Brancher l'appareil à l'aide du bloc de conversion électrique avant d'appuyer longuement sur la touche blanche « ON/OFF » afin de le mettre en marche ;
- ✓ **Appuyer sur la touche rouge-jaune « ZAP/PH »** afin de sélectionner la fréquence désirée « 30 kHz », « 2,5 kHz » ou « 15 Hz » ;
- ✓ Le choix « 30 kHz » présélectionné convient à tous initialement et n'offre aucune sensation électrique, ce qui le rend très confortable pour l'utilisateur :
  - 30 kHz = 30 000 Hz = Haute fréquence du Dr Hulda (aucune sensation),
  - 2.5 kHz = 2 500 Hz = Fréquence intermédiaire de RIFE (peu de sensations),
  - 15 Hz = Basse fréquence de Croft (sensations perceptibles).
- ✓ **Appuyer sur la touche horloge jaune « MINUTEUR »** afin d'ajuster le temps de la séance ionique entre 5 à 60 minutes ;
- ✓ La durée préprogrammée de 30 minutes doit généralement être ajustée à 10 minutes ;
- ✓ **Appuyer sur la touche rouge GO « ZAPPER »** afin de débiter ou arrêter la séance ;
- ✓ Si tout est en règle, un voyant blanc « SÉANCE EN COURS » s'allume ;
- ✓ Un point vert clignotant apparaît aussi dans le bas de l'afficheur de temps ;
- ✓ **En cas de problème, suivre la procédure de dépannage suivante.**

### C. DÉPANNAGE DU ZAPPER VITALBODY 3 EN 1

#### Si l'appareil est allumé, mais que rien ne se produit pendant la séance :

- ✓ Voir à ce que la peau en contact avec le cuivre reste humide ;
- ✓ Il est normal de ne pas ressentir le passage du courant électrique à l'usage de la fréquence de 30 kHz (haute) et même celle de 2,5 kHz (intermédiaire) ;
- ✓ Certains usagers ne ressentent aucune des trois fréquences comme les électriciens et les gens sous antidépresseurs, lesquels empêchent la réponse nerveuse ;
- ✓ Sélectionner la fréquence de 15 Hz (basse) pour mieux ressentir le passage du courant ;
- ✓ Éteindre complètement l'appareil principal et toucher les tiges de cuivre ensemble lorsqu'elles sont branchées. Le voyant blanc « SÉANCE EN COURS » s'allumera légèrement afin de confirmer que le circuit est fonctionnel.

#### La séance s'arrête et l'appareil affiche une alarme en lien avec le bain ionique :

- ✓ Appuyer sur la touche rouge GO « ZAPPER » et non pas sur la verte dédiée au bain ionique ;
- ✓ Le voyant « SESSION EN COURS » doit être blanc, car le vert est dédié au bain ionique.

#### Si l'appareil principal semble sans aucune alimentation électrique :

- ✓ Resserrer les branchements du bloc de conversion électrique ;
- ✓ Vérifier que son **voyant vert** de fonctionnement sur le coin supérieur droit est allumé ;
- ✓ Vérifier l'état du fusible arrière en dévissant son capuchon et s'assurer que le filament métallique interne ne soit pas rompu et que le tube en verre ne soit pas noirci ;
- ✓ Un fusible de rechange se trouve dans la pochette interne de la valise de transport ;
- ✓ Revisser le capuchon du compartiment à fusible en arrière de l'appareil.

#### Si un problème persiste, veuillez nous contacter au 1-866-981-0357.

## D. OPÉRATION DU VITALZAPPER PORTABLE



- ✓ Préalablement lire les contre-indications et les notes importantes précédentes afin de bien les respecter ;
- ✓ Brancher et allumer l'appareil à l'aide du petit bloc de conversion électrique avant d'activer l'interrupteur « ON/OFF » ;
- ✓ **La batterie 9 V interne prend la relève** si l'appareil est débranché du réseau électrique ;
- ✓ Sélectionner par branchement la fréquence désirée sur l'appareil principal :
  - 30 kHz = 30 000 Hz = Haute fréquence du Dr Hulda (aucune sensation),
  - 2.5 kHz = 2 500 Hz = Fréquence intermédiaire de RIFE (peu de sensations),
  - 15 Hz = Basse fréquence de Croft (sensations perceptibles).
- ✓ **Minuter la durée de la séance à 10 minutes**, ce qui est suffisant dans la majorité des cas ;
- ✓ Si tout est en règle, un faible voyant blanc constant ou scintillant apparaît sur le dessus de l'appareil aligné avec le branchement du fils des tiges cuivrées.
- ✓ **En cas de problème, suivre la procédure de dépannage suivante.**

## E. DÉPANNAGE DU VITALZAPPER PORTABLE

Si l'appareil est allumé, mais que rien ne se produit pendant la séance :

- ✓ Voir à ce que la peau en contact avec le cuivre reste humide ;
- ✓ Il est normal de ne pas ressentir le passage du courant électrique à l'usage de la fréquence de 30 kHz (haute) et même celle de 2,5 kHz (intermédiaire) ;
- ✓ Certains usagers ne ressentent aucune des trois fréquences comme les électriciens et les gens sous antidépresseurs, lesquels empêchent la réponse nerveuse ;
- ✓ Sélectionner la fréquence de 15 Hz (basse) pour mieux ressentir le passage du courant.

Si l'appareil principal semble sans aucune alimentation électrique :

- ✓ Vérifier les branchements du bloc de conversion électrique ;
- ✓ Vérifier que l'unité est en marche et que le voyant d'opération est allumé ;
- ✓ Changer la batterie de 9 V dans le compartiment vissé sous l'appareil lorsqu'il est utilisé en mode autonome, c'est-à-dire débranché du réseau électrique.

Si un problème persiste, veuillez nous contacter au 1-866-981-0357.

## F. FIN DE LA SÉANCE

- ✓ **Éteindre l'appareil et débrancher le bloc d'alimentation électrique** de la prise murale afin d'éviter qu'il soit inutilement sous tension pendant plusieurs jours ;
- ✓ Rincer, laver et essuyer la peau ayant été en contact avec le cuivre ;
- ✓ Si possible, laisser les connecteurs en place dans l'extrémité de chaque tige ;
- ✓ **Boire un grand verre d'eau en y ajoutant 20 gouttes de minéraux liquides** ConcenTrace et ajouter un peu de jus de citron ou d'orange afin de cacher le goût si nécessaire.

## G. ENTRETIEN DES TIGES CUIVRÉES

- ✓ Il est normal et non dommageable que le cuivre s'oxyde avec l'acidité de la peau pour devenir légèrement brun ou verdâtre avec le temps et l'usage ;
- ✓ Idéalement, ne rien faire et laisser le cuivre s'oxyder, ce qui n'affecte pas son efficacité, mais seulement son apparence esthétique ;
- ✓ Nettoyer les tiges avec une éponge magique ou un nettoyeur à métaux doux si désiré.

## H. PROTOCOLE D'USAGE DU ZAPPER

- ✓ **Exécuter préalablement une dizaine de séances ioniques dès le 1<sup>er</sup> mois** avant d'utiliser le Zapper afin d'assainir le corps tout en favorisant une meilleure circulation des fluides et une plus grande efficacité des organes filtres ;
- ✓ Ignorer l'étape précédente si vous ne possédez pas l'appareil multifonction VitalBody 3 en 1 ou nous contacter pour plus d'informations le concernant ;
- ✓ **Exécuter 10 minutes de Zapper quotidiennement** au 2<sup>e</sup> mois du protocole ;
- ✓ **Exécuter 3 x 10 minutes de Zapper quotidiennement** au 3<sup>e</sup> mois du protocole ;
- ✓ **Le Zapper s'utilise quotidiennement** comme un antibiotique ;
- ✓ Débuter avec quelques séances de 5 minutes seulement pour un cas de santé fragile risquant des malaises de détoxification initiaux ;
- ✓ **Varier régulièrement la fréquence (15 Hz, 2,5 kHz, 30 kHz) et la position des tiges** afin d'éviter l'accoutumance et d'obtenir un plus large spectre d'efficacité sur les parasites ;
- ✓ **Bien suivre le protocole afin d'éviter une surcharge toxique** remise en circulation dans le système lymphatique agissant comme un collecteur de déchets cellulaires ;
- ✓ **En cas de malaise persistant ou de crise de rétablissement** durant plus de trois jours, cesser les séances pour un certain temps afin de reposer le métabolisme ;
- ✓ **Boire beaucoup d'eau pure, manger sainement et faire plus d'exercices** afin de favoriser la détoxification des tissus et des fluides corporels ;
- ✓ **Reprendre le protocole où celui-ci a été interrompu** dès que les complications temporaires et les symptômes de nettoyage métabolique ont disparu ;
- ✓ Une séance ionique de 30 minutes est identifiée par **ION-30**, 10 minutes de Zapper par **ZAP-10** et 3 séances de 10 minutes de Zapper par **3xZAP-10** dans les grilles suivantes ;
- ✓ Exécuter le Zapper avant ou après le bain ionique lorsqu'ils ont lieu le même jour ;
- ✓ **Voici le résumé des trois premiers mois d'usage du bain ionique incluant le Zapper :**

LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI	DIMANCHE
<b>1<sup>er</sup></b> <b>MOIS</b>	1 ION-30	2	3	4 ION-30	5	6
7 ION-30	8	9	10 ION-30	11	12	13 ION-30
14	15	16 ION-30	17	18	19 ION-30	20
21	22 ION-30	23	24	25 ION-30	26	27
28 ION-30	29	30	31 ION-30			

LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI	DIMANCHE
<b>2<sup>e</sup></b> <b>MOIS</b>	1 ZAP-10 ION-30	2 ZAP-10	3 ZAP-10	4 ZAP-10 ION-30	5 ZAP-10	6 ZAP-10
7 ZAP-10 ION-30	8 ZAP-10	9 ZAP-10	10 ZAP-10 ION-30	11 ZAP-10	12 ZAP-10	13 ZAP-10 ION-30
14 ZAP-10	15 ZAP-10	16 ZAP-10 ION-30	17 ZAP-10	18 ZAP-10	19 ZAP-10 ION-30	20 ZAP-10
21 ZAP-10	22 ZAP-10 ION-30	23 ZAP-10	24 ZAP-10	25 ZAP-10 ION-30	26 ZAP-10	27 ZAP-10
28 ZAP-10 ION-30	29 ZAP-10	30 ZAP-10	31 ZAP-10 ION-30			

LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI	DIMANCHE
<b>3<sup>e</sup></b> <b>MOIS</b>	1 3xZAP-10 ION-30	2 3xZAP-10	3 3xZAP-10	4 3xZAP-10 ION-30	5 3xZAP-10	6 3xZAP-10
7 3xZAP-10 ION-30	8 3xZAP-10	9 3xZAP-10	10 3xZAP-10 ION-30	11 3xZAP-10	12 3xZAP-10	13 3xZAP-10 ION-30
14 3xZAP-10	15 3xZAP-10	16 3xZAP-10 ION-30	17 3xZAP-10	18 3xZAP-10	19 3xZAP-10 ION-30	20 3xZAP-10
21 3xZAP-10	22 3xZAP-10 ION-30	23 3xZAP-10	24 3xZAP-10	25 3xZAP-10 ION-30	26 3xZAP-10	27 3xZAP-10
28 3xZAP-10 ION-30	29 3xZAP-10	30 3xZAP-10	31 3xZAP-10 ION-30			

- ✓ **Après l'exécution de ce protocole initial de 3 mois**, cesser les séances de Zapper afin de laisser le système immunitaire s'équilibrer sans intervention ;
- ✓ **Reprendre 1 à 3 séances de 10 minutes chaque jour** pendant 1 à 2 semaines afin de stimuler les fonctions immunitaires en cas de résurgence des signes suivants :



- Présence d'infection, de grippe, de rhume, etc.,
  - Envies irrésistibles de glucides ou rages de sucre quotidiennes,
  - Douleurs inflammatoires chroniques, excès de mucosités et de sécrétions,
  - Plaies acidifiées, démangeaisons cutanées et nervosité anormale.
- ✓ Boire beaucoup d'eau, manger peu et très sainement tout en évitant les sucres, les glucides et les produits laitiers afin de minimiser l'inflammation, l'acidité métabolique et la prolifération des microorganismes parasites nuisibles dans le corps ;
  - ✓ Il est possible de combiner les séances avec des produits naturels épuratifs ou des suppléments essentiels purs et de bonne qualité ;
  - ✓ En cas de persistance de certains symptômes ou pour un suivi particulier, veuillez nous contacter à [info@VitalAxiom.com](mailto:info@VitalAxiom.com) ou au 1-866-981-0357 afin d'être guidé vers d'autres solutions alternatives ou d'être conseillé sur des méthodes naturelles complémentaires.

# À PROPOS DE LA CEINTURE CHAUFFANTE

---

## Notes importantes :

- ✓ N'exige aucune contre-indication d'usage ;
- ✓ Ne pas positionner la bande chauffante autour de la tête ;
- ✓ Éviter de trop chauffer les endroits où la peau est mince et fragile ;
- ✓ Installer préférentiellement la ceinture par-dessus les vêtements en évitant ainsi un contact cutané direct, surtout lors d'une séance prolongée et de forte puissance ;
- ✓ Cesser la séance si une chaleur trop intense et persistante se fait sentir ;
- ✓ Attention à la bande velcro capable de s'agripper aux manches des vêtements brodés ;
- ✓ **Ne jamais activer la ceinture lorsqu'elle est repliée sur elle-même**, car cela peut faire fondre et coller les parois de son recouvrement extérieur ;
- ✓ **Exécuter préférentiellement des séances combinées** avec le bain ionique ou le Zapper ;
- ✓ La ceinture est facultative et s'utilise à volonté indépendamment ou simultanément avec les autres fonctions de l'ensemble VitalBody 3 en 1.

## COMMENT UTILISER LA CEINTURE ?

---

### A. PRÉPARATION DE LA CEINTURE



- ✓ Brancher la ceinture à l'arrière de l'appareil VitalBody 3 en 1 ;
- ✓ Envelopper les muscles tendus ou les articulations douloureuses comme la colonne vertébrale, le dos, le genou, le coude, l'épaule, le cou, etc. ;
- ✓ **Installer préférentiellement la ceinture sur les reins, dans le bas du dos, ou autour de la taille**, lorsqu'elle est utilisée simultanément à la séance d'ionisation ou de Zapper ;
- ✓ Positionner l'œillet métallique du fil sortant de la ceinture vers l'extérieur, sur le dessus, et l'orienter du côté de l'appareil principal afin de raccourcir le trajet du fil ;
- ✓ Utiliser la bande élastique velcro noire afin d'agrandir la ceinture pour les fortes tailles.

### B. OPÉRATION DE LA CEINTURE

- ✓ Préalablement lire les notes importantes précédentes afin de bien les respecter ;
- ✓ Brancher l'appareil à l'aide du bloc de conversion électrique avant d'appuyer longuement sur la touche blanche « ON/OFF » afin de le mettre en marche ;
- ✓ Le contrôle de la ceinture est situé sur la partie supérieure vers l'arrière de l'appareil ;

- ✓ Appuyer sur la touche gradateur jaune « PUISSANCE » afin de sélectionner le niveau de chaleur désiré « FAIBLE », « MOYEN » ou « FORT » ;
- ✓ La ceinture est « **INACTIVE** » par défaut puisqu'elle est optionnelle ;
- ✓ Lorsque la ceinture est activée, un minuteur invisible interne démarre automatiquement pour une durée de 60 minutes afin d'éviter qu'elle chauffe continuellement ;
- ✓ Si tout est en règle, un **voyant vert** de fonctionnement apparaît au travers du boîtier dans le coin supérieur de l'appareil en face du connecteur arrière ;
- ✓ En cas de problème, suivre la procédure de dépannage suivante.

## C. DÉPANNAGE DE LA CEINTURE

### Si la ceinture ne chauffe pas ou chauffe de façon non uniforme :

- ✓ Appuyer sur la touche gradateur jaune « PUISSANCE » afin d'activer la ceinture ;
- ✓ Normalement, un **voyant vert** de fonctionnement apparaît au travers du boîtier dans le coin supérieur de l'appareil en face du connecteur arrière ;
- ✓ Si celui-ci est éteint, l'appareil principal est probablement défectueux ;
- ✓ Si celui-ci est allumé, la ceinture est certainement défectueuse ;
- ✓ Nous contacter dans un tel cas au 1-866-981-0357.

### Si la ceinture chauffe trop intensément et devient brûlante :

- ✓ Appuyer sur la touche gradateur jaune « PUISSANCE » afin de désactiver la ceinture ;
- ✓ Normalement, le **voyant vert** de fonctionnement situé dans le coin supérieur de l'appareil en face du connecteur arrière doit s'éteindre ;
- ✓ Si celui-ci reste toujours allumé, alors le contrôle électronique de la ceinture est ouvert et endommagé, et laisse ainsi passer le plein courant en permanence ;
- ✓ Nous contacter dans un tel cas au 1-866-981-0357.

### Si l'appareil principal semble sans aucune alimentation électrique :

- ✓ Resserrer les branchements du bloc de conversion électrique ;
- ✓ Vérifier que son **voyant vert** de fonctionnement sur le coin supérieur droit est allumé ;
- ✓ Vérifier l'état du fusible arrière en dévissant son capuchon et s'assurer que le filament métallique interne ne soit pas rompu et que le tube en verre ne soit pas noirci ;
- ✓ Un fusible de rechange se trouve dans la pochette du couvert de la valise de transport.
- ✓ Revisser le capuchon du compartiment à fusible en arrière de l'appareil.

### Si un problème persiste, veuillez nous contacter au 1-866-981-0357.

## D. FIN DE LA SÉANCE INFRAROUGE

- ✓ Retirer la ceinture en la laissant branchée à l'appareil ;
- ✓ La ceinture s'arrête automatiquement après 60 minutes grâce au minuteur interne ;
- ✓ Éteindre l'appareil et débrancher le bloc d'alimentation électrique de la prise murale afin d'éviter qu'il soit inutilement sous tension pendant plusieurs jours ;
- ✓ Boire un grand verre d'eau en y ajoutant 20 gouttes de minéraux liquides ConcenTrace et ajouter un peu de jus de citron ou d'orange afin de cacher le goût si nécessaire.